

..... DĚTSKÝ VAGINOSKOP



DĚTSKÝ VAGINOSKOP MT 1000

Vaginoskop je určen pro snadné provádění gynekologických vyšetření dětí a žen s úzkým poševním vchodem, kde není možné použití Scherbakova zrcadla. Používá se ve spojení se „Zdrojem studeného světla MT 2002“ ohebným světlovodným kabelem. Pomocí vaginoskopu je možno vidět změny na poševní sliznici a na poševním čípku, případně je také vidět cizí těleso a jeho uložení. Další výhodou vaginoskopu je skutečnost, že není třeba provádět operativní rozšíření poševního vchodu. Je umožněna včasná diagnostika zhoubného nádoru (sarkoma kordicoides) a rozlišení krvácení ze stěny poševní a z hrdla děložního. Není tedy nutno u většiny vrozených vad nebo malformací provádět laparotomii, protože čípek je pomocí vaginoskopu vidět.

Technické údaje:

Hmotnost vaginoskopu včetně obalu: 4kg


Rozměry kufříku: 400 x 280 x 100 mm

Zavaděč a zrcadlo Ø:

5 mm (délka 70 mm) 1 ks, 7 mm (délka 70 mm) 5 ks,

10 mm (délka 70 mm) 5 ks, 14 mm (délka 80 mm) 5 ks,

16 mm (délka 100 mm) 1 ks, 20 mm (délka 100 mm) 1 ks.

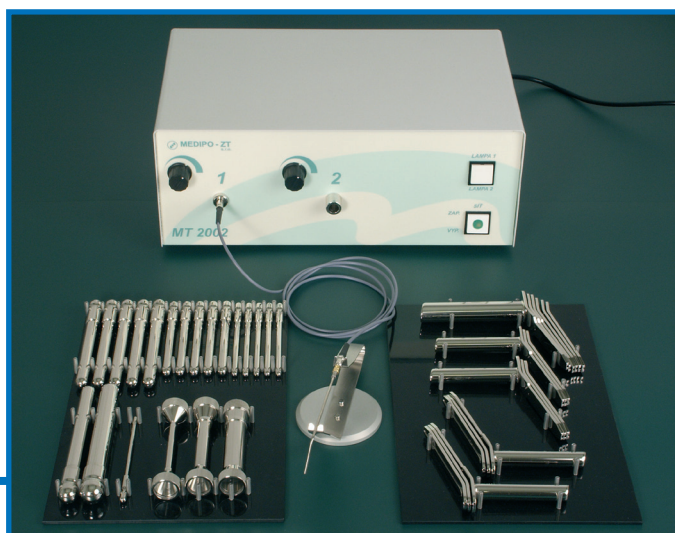

Optika pro Ø:

5 mm - 1 ks, 7 mm - 1 ks, 10 mm - 1 ks, 14 mm - 1 ks,

16 mm - 1 ks, 20 mm - 1 ks, podstavec - 1 ks, podložka - 1 ks

Součástí dodávky je halogenový zdroj studeného světla, včetně 1 ks světlovodného kabelu a 1 ks nosiče světla.